



怡安 廢液收集系統 3000ml

- ✓ 安全
- ✓ 簡單
- ✓ 方便

適用於醫院中各種負壓抽吸系統，並同時兼具安全與環保



LILY MEDICAL



硬瓶



引流袋 (綠蓋)



引流袋 (白蓋)



連接管



安全瓶



硬瓶配件
綠色或白色



掛件
綠色或白色

產品	型號	規格	顏色
引流袋	CSB-300	3,000ml, 不含疏水性過濾閥	白色
	CSB-300S	3,000ml, 含疏水性過濾閥	綠色
硬瓶	CSB-030	3,000ml	白色
	CSB-031	3,000ml	綠色



GMP Certificate



ISO 13485:2016




TEL +886-37-612-625
 FAX +886-37-612-720
 E-MAIL customer.service@lily-medical.com
 WEB www.lily-medical.com
 ADD NO.28-2, Shun Jeau Diann, Chunan Town,
 Miaoli County, 35056. Taiwan R.O.C



優質的安全設計

- 密封良好且外觀簡潔
- 無DEHP材質且可自然分解

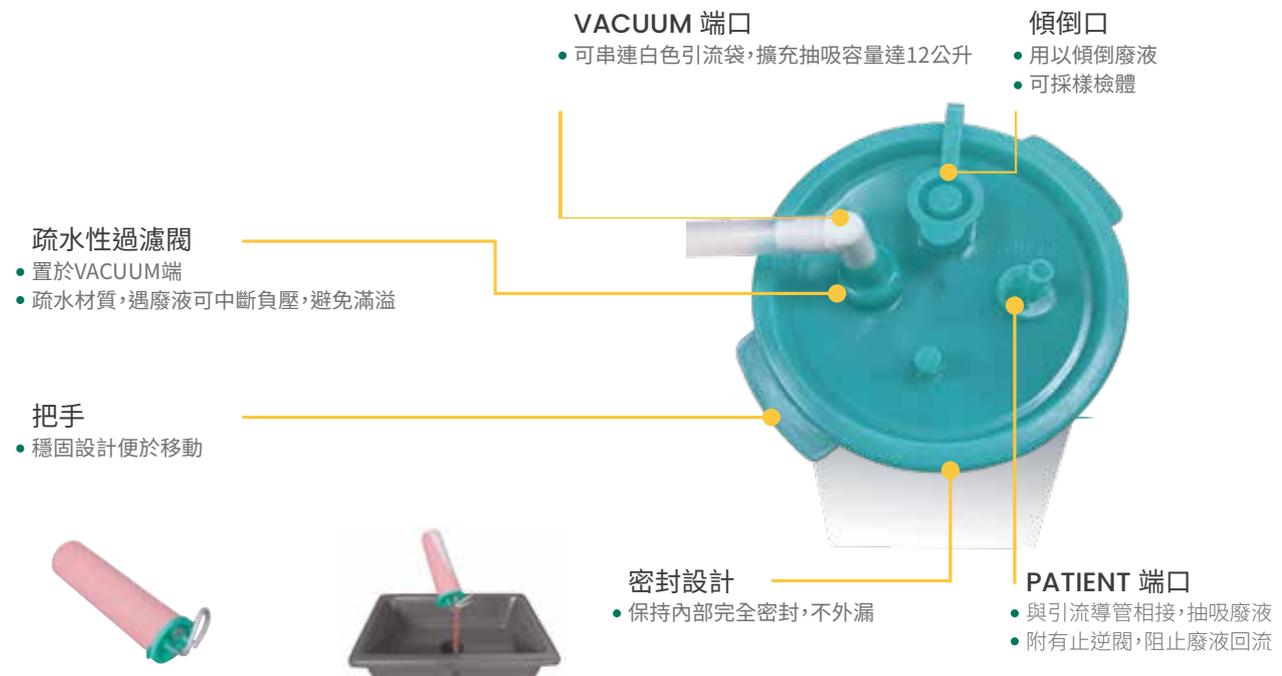

疏水性止逆閥

- 用作組合細菌過濾器 and 溢流保護
- 高細菌氣溶膠過濾效率


產品	BFE*	Airflow SCFH
疏水性止逆閥	>99.98%	29.2 scfh

*Bacterial Filtration Efficiency
(根據 ASTM F2102 進行測試)



卓越效果

- 系統性鏈接
- 持續穩定的抽吸壓力

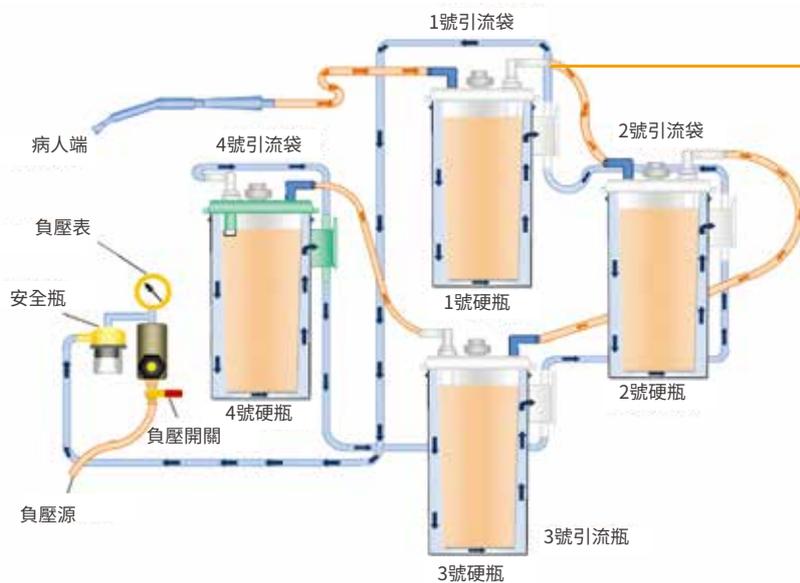

廢液自動自1號引流袋->2->3
並會於4號滿瓶時止溢

怡安負壓引流收集系統提供優良的
抽吸效果，且安全瓶能防止廢液進
入負壓系統

安裝與特色

靈活性

袋子和收集罐可單獨使用，或串聯連接最多 4 個瓶子

安全性

完全密封，適用於長時間使用

友善性

透過顏色(白色或綠色)輕鬆識別，確保無誤操作

收集瓶

刻度線清晰易讀，最小刻度為 50 ml

